

PALFIQUE ESTELITE PASTE




**Estetik
Restorasyonların
En Kolay ve
Ekonomik Yolu**

Mükemmel ve Uzun Süre Stabil Cila

Patentli *Supra-Nano Sferikal* doldurucular sayesinde çok basit ve kolay cila sonrası bile uzun süre stabil parlaklık elde edilir.


YÜZEY GÖRÜNTÜSÜ

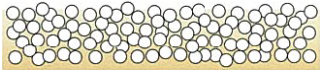

PALFIQUE ESTELITE




Diğer markaların düzensiz doldurucu yapısı

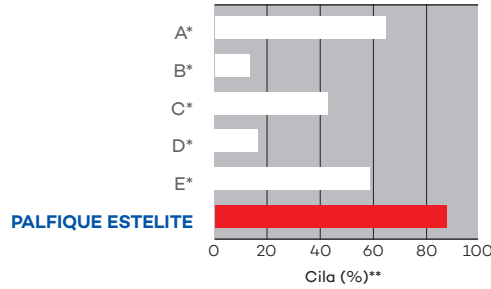

Patentli Supra-Nano Sferikal Doldurucu

Sadece Tokuyama'nın mucidi olduğu *Supra Nano Sferikal Doldurucular* Patentli Sol-Gel tekniği ile tek tek, yuvarlak ve tamamı 0,2 mikron olarak üretilir. Adeta inci tanelerine benzeyen bu dolduruculardan 1 şırınga PALFIQUE ESTELITE tüp içerisinde yaklaşık 30 milyar adet vardır.

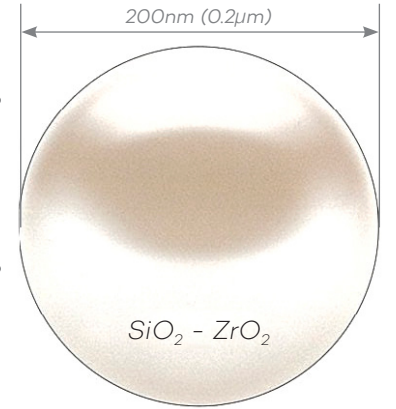

Mükemmel Renk Uyumu

Sadece 4 ana renk (A1, A2, A3, A3.5) ve 2 opaker renk (OA2, OA3) ile son derece estetik ve doğal restorasyonlar yapabilirsiniz. Eşsiz doldurucu teknolojisi sayesinde mükemmel bir renk uyumu elde edersiniz.




Dr. Sueo Saitou'nun izniyle



İdeal Aşınma Özellikleri


Mükemmel aşınım direnci ile birlikte Palfique Estelite Paste aynı zamanda karşıt dişi de minimum seviyede aşındırır.

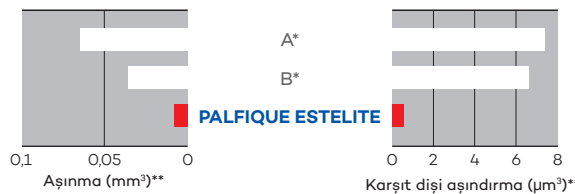

*Tokuyama Dental'nin tescilli ticari markası değildir.

**Kaynak: Tokuya Dental R&D

Sol-Gel Tekniği

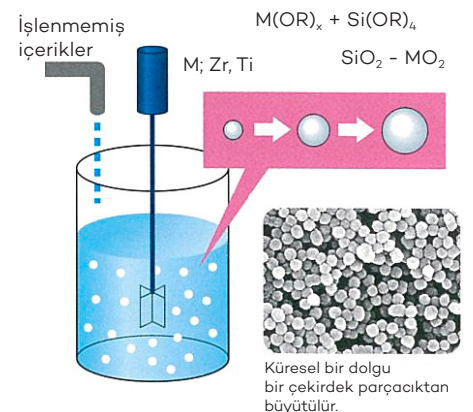


KOLAY RENK SEÇİMİ

			Dış Rengi ^{a)}														
			açık	koyu													
			B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A3.5	B4	C3	A4
Ana Renk (Klas I, II ve V için)	A1																
	A2																
	A3																
	A3.5																
Opaker Renkler ^{b)} (Klas III ve IV için)	OA2																
	OA3																

a) Yukarıdaki renkler vita skalasına göre seçilmiştir.

b) Opaker renkler (OA2, OA3) Klas III ve Klas IV restorasyonlarda oluşan grileşmenin önüne geçer.

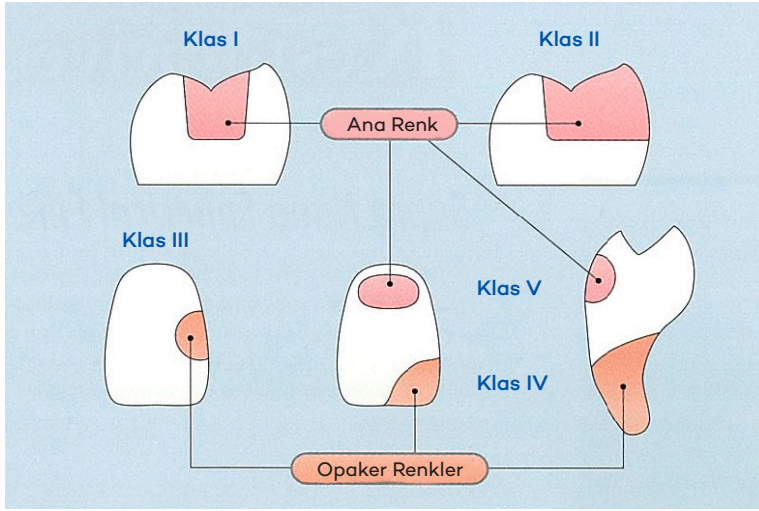

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

Esneleme Gücü (MPa)	115
Esneklik Modülü (GPa)	9.8
Basınç Mukavemeti (MPa)	368
Büzülme (%)	1.3
Radyopasite (%A1)	190

Kaynak: Tokuya Dental R&D

AMBALAJ

PALFIQUE ESTELITE PASTE **INTRO KIT**



Mevcut Renkler



PALFIQUE ESTELITE PASTE **REFİL**



Ürün İçeriği

- 1 adet 3.8 gr şiringa

30 €
+KDV



Ankara Ofis
Dr. Mediha Eldem Sk.
No: 68/16
Kızılay-ANKARA
Tel : (0312) 430 55 16 (pbx)
Faks : (0312) 430 55 17

İstanbul Ofis
Oğuzhan Cad. Çağanak Sk.
No: 5/3
Fındıkzade-Fatih/İSTANBUL
Tel : (0212) 491 10 88 (pbx)
Faks : (0212) 491 10 89

www.tokuyamaturkiye.com
info@tokuyamaturkiye.com

/tokuyamaturkiye

Distributed by
dunya
dental
www.dunyadental.com